

高频震动切片机 NHQ-01




震动频率可调节



快速高效切片



样本仓可定制

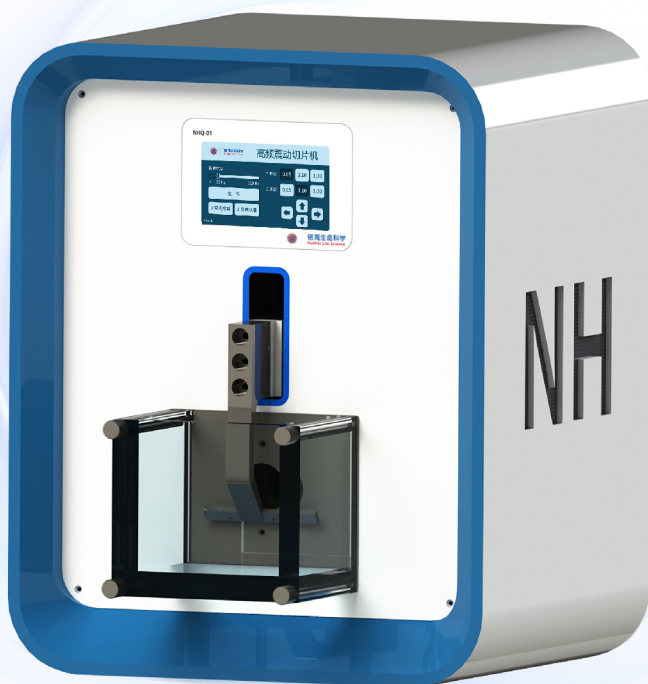

产品介绍

可根据具体的应用场景需求快速获得薄或厚的切片,而无需担心损坏组织样品。诺海高频震动切片机专为0.1-2mm厚切片设计,与其他切片机相比,刀片以更高的频率和更大的振幅范围振动,并具有独特的偏转控制机制,可获得更快更准更稳的生物切片。

产品特点

- 可实现0-120hz震动频率无极调节。
- 震动幅度可达0-3mm。
- 当前仓可实现30mm×30mm×40mm样本切片,可定制更大尺寸样本仓。
- 可完成6mm/s快速切片。
- 更便捷的可视化操作方式。