





活体循环系统 NHL-01

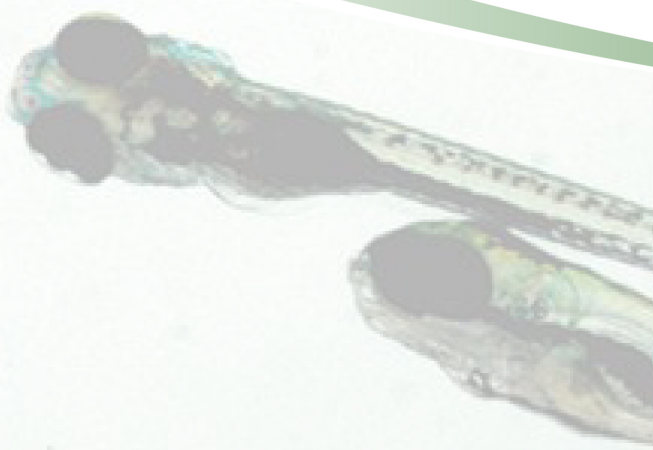

全自动化
操作

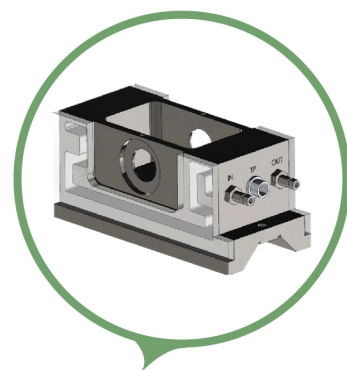

精准控温



兼容LS18平铺
光片显微镜

产品介绍 ▶

NHL-01是一款专为活体成像而研发的具备多功能监测的仪器。配合诺海LS18平铺光片显微镜,可对斑马鱼等多种活体在保证生命体征的情况下进行全方位探究。

产品特点 ▶

- 具备全自动运行机制,即插即用,方便快捷。
- 采用水浴的方式可实现室温-50°C精准控温,温度变化更加温和,最大减少对活体的刺激,保证活体有更加舒适的温度条件。
- 兼容RS485MODBUS协议,可实现多设备联机等外接配套设备。

产品附件表 ▶

序号	名称	数量
1	监测平台 (NHL-01)	1
2	活体仓	1
3	样品架	1
4	快插通道	2
5	传感器连接器	1